

DRAP DE TRANSFERT DOMICILE

RÉFÉRENCES :
MAD130 / MAD200




© ALTER ECO SANTÉ

Le drap de transfert ALESOLI® est indispensable pour rehausser ou mobiliser confortablement un patient atone au domicile.

Inséré sous le patient, l'effet de glisse allège la charge de travail des soignants et contribue à la prévention des escarres. ALESOLI® s'utilise sur tous types de couchages.

Associé à la sangle POULIE® ou au coussin ESCABOLI®, il permet de solliciter les capacités résiduelles du patient.

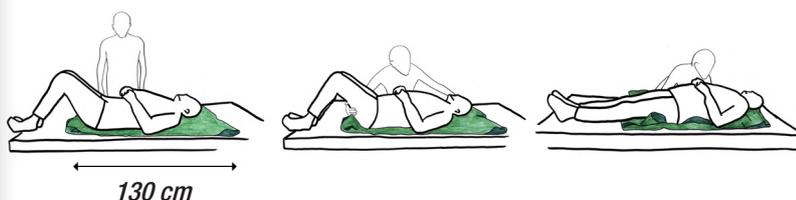

LES PRODUIT

La large surface de glisse des draps ALESOLI® est la **plus adaptée à la mobilisation au lit (130 x 90 cm)**.

Il contribue à la **prévention des escarres** en évitant les cisaillements.


Le drap de transfert ALESOLI® permet de **prévenir les lombalgies** en allégeant de 60% l'effort des soignants.

Disponible en **plusieurs tailles**.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions Surface	Poids	Charge max.
MAD130 N° Identification UDI : 03760311370052	Drap de rehaussement domicile ALESOLI®	130 x 90 cm 1,17 m ²	200 g	300 kg
MAD200 N° Identification UDI : 03760311371110	Drap de rehaussement domicile ALESOLI®	200 x 120 cm 2,40 m ²	250 g	300 kg



PRODUIT :	ALESOLI®
DESCRIPTION COURTE :	DRAP DE TRANSFERT DOMICILE
RÉFÉRENCES :	VOIR TABLEAU REF
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	VOIR TABLEAU REF
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	ROYAUME-UNI

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une incapacité de rehaussement ou de mobilisation en position allongée.</p> <p>S'utilise avec l'étiquette à l'extérieur.</p> <p>Doit être placé sous le patient : sous les fesses, les épaules et la tête.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, le drap ALESOLI® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit.</p> <p>Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante.</p> <p>Ne pas laisser un patient seul sur le drap.</p> <p>Non approprié pour un usage en collectivité.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 60° en machine. • Séchage prohibé. • Lavage à la main, trempage et essuyage.
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Polyester avec enduction silicone.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sachet contenant 1 drap de transfert ALESOLI® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Vert anis.</p>